Hurricane™ RX

Cathéter biliaire de dilatation à ballonnet

CATHÉTER BILIAIRE DE DILATATION À BALLONNET À USAGE UNIQUE HURRICANE RX*

Code produit	Diam. ext. du ballonnet (mm)	Longueur du ballonnet (cm)	Diam. ext. du cathéter (Fr)	Longueur du cathéter (cm)	Pression de gonflage maximale (ATM)	Taille minimale du canal (mm)	Fil-guide recommandé
M005 4589 0	4	2	5,8	180	12	3,2	0,035"
M005 4590 0	4	4	5,8	180	12	3,2	0,035"
M005 4591 0	6	2	5,8	180	11	3,2	0,035"
M005 4592 0	6	4	5,8	180	11	3,2	0,035"
M005 4593 0	8	2	5,8	180	11	3,2	0,035"
M005 4594 0	8	4	5,8	180	11	3,2	0,035"
M005 4595 0	10	2	5,8	180	8	3,2	0,035"
M005 4596 0	10	4	5,8	180	8	3,2	0,035"

^{*}Fil-quide recommandé: Jagwire™ Hydra 0,035".

DISPOSITIF DE GONFLAGE BREEZE™

M00566660 Dispositif de gonflage Breeze RX

rection Européenne – Paris							
+33 1 57 66 80 00	F: +33 1 57 66 84 99						
rique du Sud							
+27 11 840 8600	F: +27 11 463 6077						
lemagne (Appel gr 0800 072 3303							
gentine							
+5411 4896 8556	F: +5411 4896 8550						
stralie / Nouvelle 2 +61 2 8336 5555	Zélande F: +61 2 9316 5528						
gentine +5411 4896 8556 estralie/Nouvelle 2	F: +5411 4896 8550 Zélande						

T. +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566 Fi. +86 12 852 1560 Fi. +86 12 851 1500 Fi

| Hongrie | Pologne | T. +918 63 04 0 | F. +36 1 456 30 41 | T. +48 22 435 1414 | F. +48 22 435 1410 | Inde - Bangalore | T. +918 05 112 11045 | F. +918 05 112 11046 | T. +918 05 112 1106 | T. +918 14 2648 0318 | F. +914 42 641 4695 | T. +919 142 2647 845 | T. +919 142 2647 845 | T. +911 12 2618 1024 | T. +918 122 2617 7884 | F. +91 22 2617 7883 | T. +918 25 667 868 | F. +918 010 60 60 200 | T. +918 010 60 60 1 | F. +39 010 60 60 200 | T. +314 33 56 8260 | F. +314 33 56 8260 | F. +314 33 56 8260 | T. +316 33 56 8260 | F. +60 3 7957 4866 | T. +60 2 2645 3810 | F. +66 2 2654 3810 | F. +66 2 2654 3810 | F. +66 2 2654 3810 | F. +60 2 2654 3810 | F. +60 2 32 32 78 00 | F. +90 312 447 98 54 | Turquie - Ankara | T. +90 11 805 282 | F. +961 1 805 445 | Turquie - Latabul | T. +90 11 805 282 | F. +961 1 805 445 | Turquie - Machae | F. +90 212 327 78 00 | F. +90 212 327 78 20 | F. +59 82 900 6212 | F. +59 82 900 6212

Scientific


Delivering what's next.™**

www.bostonscientific.com www.bostonscientific.co.uk www.bostonscientific.de www.bostonscientific.es www.bostonscientific.fr www.bostonscientific.it

© 2006 Boston Scientific Corporation ou ses filiales. Tous droits réservés. DINEND2125FA

Hurricane™ RX

Cathéter biliaire de dilatation à ballonnet

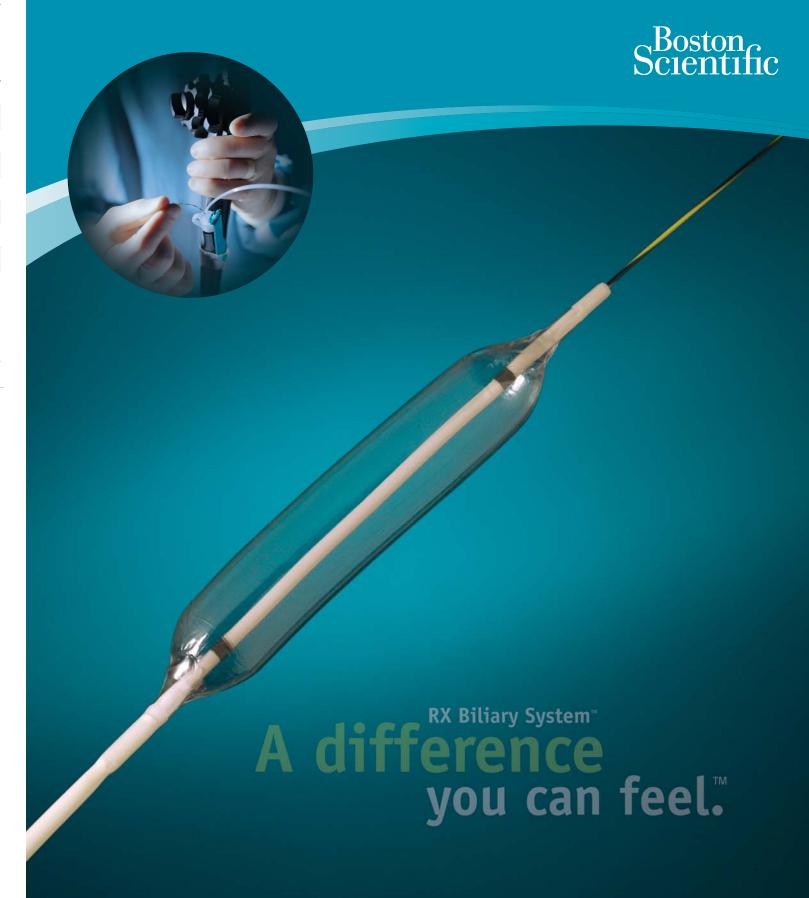

routes a marques operates international as a population of the contraction of the contrac

RX Biliary System

A difference you can feel.™

L'endoscope vous indique le chemin, mais c'est votre toucher qui vous amène où vous devez aller. Le dispositif qui constitue le Système RX Biliary a été développé pour faciliter l'accès et le contrôle avec une sensation de réactivité du dispositif qui est réellement...une différence que vous pouvez sentir.

Au fil des ans, Boston Scientific a gagné la confiance et la fidélité des clients du monde entier ayant adopté le système RX Biliary pour une utilisation quotidienne. Notre héritage de succès dans le développement des dispositifs biliaires RX nous a permis de modifier le paysage des procédures de CPRE. En innovant et en sophistiquant nos produits, nous avons mis la facilité de contrôle et d'accès à la portée de vos mains.





PRESSION ALLANT JUSQU'À 12 ATM

- ◆ La longueur du ballonnet (4 cm) apporte une stabilité optimale pendant la dilatation de la sténose
- Le dispositif de gonflage Breeze™ permet un dégonflage rapide pour limiter la gêne pour le patient
- ◆ Le matériau semi-compliant a été conçu pour s'adapter à l'anatomie du canal biliaire pendant le gonflage du ballonnet

EXCELLENT PASSAGE DANS LES STENOSES

Le cathéter à ballonnet 5,8 Fr à profil (effilé) mince est conçu pour réduire la résistance et faciliter son avancement dans les sténoses

- L'extrémité 4 Fr permet une progression moins traumatique dans la sténose
- Le Stylet rigide en acier inoxydable inséré dans la partie proximale du corps du cathéter facilite son avancement
- La conception à échange rapide (RX) permet le verrouillage du fil-guide pour sécuriser l'accès

CONÇU POUR UN POSITIONNEMENT PRECIS

Le ballonnet Hurricane RX offre des options multiples pour la visualisation

- ◆ Deux repères radio-opaques facilitent le positionnement du ballonnet
- ◆ Le produit de contraste peut être injecté avec le fil-guide en place



Dilatation d'une sténose avec le ballonnet de dilation Hurricane

UNE LARGE GAMME DE TAILLE DE BALLONNETS

Le choix de diamètres et longueurs de ballonnets facilite la sélection d'un ballonnet adapté à l'anatomie du patient et à la taille de la sténose

- ◆ Longueurs de 2 cm et 4 cm
- ◆ Diamètres du ballonnet de 4 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm

Images aimablement prêtées par Mario Traina, MD, Hôpital ISMETT, Palerme, Italie